

保証書

本書は保証期間内に本書記載内容で無料保証をおこなうことをお約束するものです。お買い上げの日から保証期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、弊社お客様サービスセンターにご依頼ください。

持込修理

※この保証書は販売店様の日付けの入ったレシートまたは領収書がなければ無効となります。

製品コード	KSHL-001	製品名	口腔洗浄器 水ようじ
※お買い上げ日	年 月 日	保証期間	お買い上げ日より：1年間
お客様	お名前		
	ご住所 〒		
	電話番号		
※販売店	住所・店名		
	電話番号		

店舗印

当製品の保証書にご記入されたお客様の個人情報は、修理・交換後の製品発送のみ使用し、それ以外に使用したり、第三者に提供することは一切ございません。

販売店さまへ ※印欄は必ず記入（もしくは押印）してください。

保証規定

- 保証期間内に取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料保証いたします。弊社「お客様サービスセンター」にご依頼ください。
- 保証期間内に故障した場合には、製品と本書をご持参・ご提示の上、弊社「お客様サービスセンター」にご依頼ください。
- 保証期間内でも次の場合には保証対象外になります。
 - 弊社「お客様サービスセンター」以外による分解・修理及び改造をおこなった場合
 - お客様の過失・不注意（使用上の誤り、製品をぶついたり落下等による強い衝撃を与えるなど）による故障及び損傷
 - 取扱説明書に記載されている消耗部品が自然摩耗または自然劣化していることに起因して故障が発生した場合
 - 火災・地震・その他の天災事変による故障及び損傷
 - 本書の掲示がない場合
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
 - 他人へ譲渡した場合
 - 正規販売ルート以外で購入した場合
- レンタルなどによる貸し出し、オークション等による転売・中古販売、及び譲渡によって発生した故障・損傷・劣化・損害・事故などに対して一切の責任を負いかねます。ご了承ください。
- 本書は日本国内においてのみ有効となります。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

発売元 **ライソン株式会社** 〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南2-1-33

お客様サービスセンター

TEL 06-6789-1199

〔月～金（祝日除く）10時～16時〕

WEBからの修理・交換の
お問い合わせはこちら

LITHON

家庭用

業務用として使用しないでください

日本国内専用

電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用
できません。またアフターサービスもできません。

口腔洗浄器 水ようじ

取扱説明書

もくじ

- 安全にお使いいただくために… P.2
- セット内容・各部名称… P.3
- ご使用前の準備… P.4
- ご使用方法… P.5
- 使用後のお手入れ・保管方法… P.6
- ノズルの交換・ご購入について… P.6
- 故障かな？と思ったら… P.7
- 製品仕様… P.7
- 保証書… P.8



このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
ご使用前に「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。
この取扱説明書はお読みになった後も、大切に保管してください。

安全にお使いいただくために

ご使用前に必ずお読みください。

- 本製品は家庭用製品です。業務用ではありません。
- 本製品は電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。またアフターサービスもできません。
- この説明書には、ご使用になる方やその周辺にいる方々や物への危害や損害を未然に防ぐためのお守りいただきたい事項を記載しています。製品を安全にご使用いただくために内容を十分にご理解いただきますようお願いいたします。

警告 この表示は、内容を無視し間違った取り扱いをすると、死亡や重傷を負う危険性の高い内容を示しています。

注意 この表示は、内容を無視すると対人的に障害を負ったり、対物的に損害の発生が想定される内容を示しています。

警告

- 使用中、プラグや電源コードが異常に熱くなったり、本体から煙や異常なおいが出るようなときは、直ちに使用を中止しコンセントから電源プラグを抜いて、弊社お客様サービスセンターにお問い合わせください。傷んだプラグやコードは絶対に交換、分解、修理、改造をしないでください。感電、ショート、発火の原因になります。
- 改造・分解は絶対にしないでください。感電や火災、やけどの原因になります。
- 交流100V、定格15A以上で使用してください。(交流100V以外では使用しないでください) 火災、感電の原因になります。
- 電源プラグをコンセントに正しくしっかりと奥まで差し込んでください。感電、ショート、発火の原因になります。
- コンセント部分に水や埃などがかからないようにしてください。感電、ショートの可能性がります。
- 水気を帯びた手で使用したり、電源プラグを抜き差ししないでください。感電、やけどの原因になります。
- 電源コードや電源プラグに傷みや異変のある場合は使用しないでください。感電、ショート、発火の原因になります。
- 電源コードに対して以下の行為はしないでください。
 - ・曲げる
 - ・ねじる
 - ・引っ張る
 - ・束ねたまま使用する
 - ・何かを上に載せる
 - ・加工する
 感電、ショート、発火の原因になります。
- コンセントは二股以上の配線で使用しないでください。電力を超えた使用は、コンセント部分の発熱、発火の原因になります。
- 本体を水に浸けたり、本体を丸洗いしないでください。感電、ショートの可能性がります。
- 子供だけで使用させたり、幼児の手の届かるところに置かないでください。感電、ショートの可能性がります。
- 本体のお手入れは、スイッチをOFFにし、電源プラグを抜いてからおこなってください。火傷、感電、ケガを負う可能性があります。



注意

- 本製品は業務用ではありません。長時間の使用は避けてください。使用後は必ずコンセントからプラグを抜いてください。
- ノズルの先端を歯や歯ぐきに接触させないでください。水流効果が低下したり、ノズルが変形する原因になります。
- 始めから強い水圧で使用しないでください。歯ぐきからの出血の原因になります。
- 自分で操作ができない方には使用させないでください。思わぬ事故、ケガの原因になります。
- 口腔内の感覚が弱い方は使用しないでください。歯ぐきからの出血の原因になります。
- 歯周病の疑いがある方、口腔内に気になる症状がある方は歯科医に相談のうえ使用してください。歯周病以外の病気による出血の原因になります。
- 不安定な場所で使用しないでください。火災の原因になります。
- 本製品を、口腔洗浄の用途以外で使用しないでください。事故につながる原因になります。
- ノズルは自分以外の方と共有して使用しないでください。感染や炎症の原因になります。
- 屋外や水気の多い浴室などでは使用・保管しないでください。感電、ショート、製品故障の原因になります。
- 直射日光の当たる場所では使用しないでください。ケガややけど、漏電の原因になります。
- 使用時以外は電源プラグはコンセントから抜いてください。ケガややけど、漏電の原因になります。
- お手入れにはベンジン、シンナー系の溶剤を使用しないでください。製品の変色、変形、故障の原因になります。
- 高温多湿、火の元に近い場では使用及び保管はしないでください。火災、発火、製品故障原因になります。
- お子様の手の届かない場所に保管してください。思わぬ事故、ケガの原因になります。
- 落としたり、強い衝撃を与えないでください。製品故障の原因になります。
- タンクに水がない状態で使用しないでください。製品故障の原因になります。
- タンク内に異物や、アルコール、洗浄液、熱湯などを入れないでください。けがや故障の原因になります。
- タンク内にノズルのつまりの原因になるごみ、糸くずなどが入らないようにしてください。製品故障の原因になります。

※誤った使用方法で発生するすべての事柄に対して、弊社は一切の責任を負いかねます。ご了承ください。

セット内容・各部名称


本体

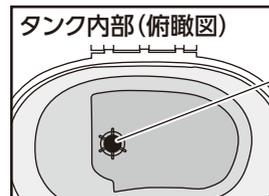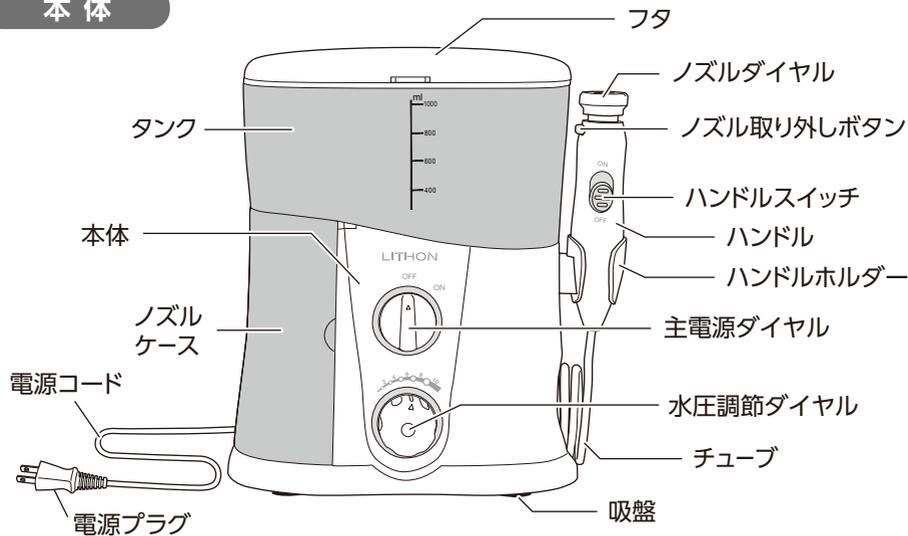

ゴムフィルター
 ※ゴミなどが機材内部に入り込まないためのフィルターです。
この黒のキャップは決して抜かないでください。
 (開梱後の状態を保ってください。)

替えノズル

ノーマルノズル

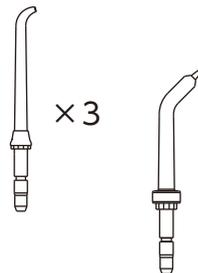

歯周ポケット用ノズル

歯列矯正用ノズル



ブラシ付き歯垢除去ノズル

舌クリーナーノズル



※各ノズルの使用方法については、P.5【ご使用方法】をご参照。

※ノズルは消耗品です。6ヶ月を目安に交換してください。ノズルが損傷した場合は交換してから使用してください。ノズルの交換については、P.6【ノズルの交換・ご購入について】をご参照。


ご使用前に

健康な方でも、使い始めに歯ぐきから出血することがあります。2週間以上出血が続く場合、または大量の出血がある場合は、歯科医に相談してください。歯周病以外の病気による出血の原因になります。

ご使用前の準備


1.タンクに水をいれる

- タンクを本体から取り外し、水またはぬるま湯(40℃以下)を入れます。
- 水を入れ終わったら、タンクを本体の元の位置にしっかりと取り付けます。

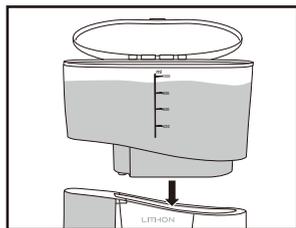

2.ハンドルにノズルをセットする

- ハンドルを取り、先端の穴にノズルをカチッと音がするまで押し込んでください。セットし終わったら、一度ハンドルを本体のハンドルホルダーに置いてください。
- ノズルを取り外す場合は、ハンドル側面のノズル取り外しボタンを押すと外れます。

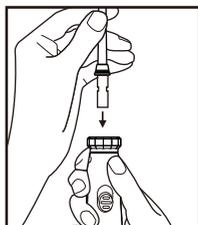


3.電源プラグをコンセントに差す

- 本体の主電源ダイヤルがOFFに入っていることを確認し、電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んでください。

4.水圧の設定

- 初めて使用する場合、水圧調節ダイヤルは1(最弱)にしておきます。使用しながら徐々に水圧を上げ、調節してください。

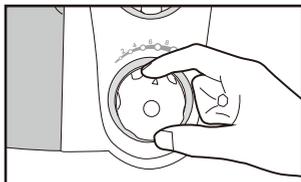


5.水流のテスト

- ハンドルスイッチがOFFになっていることを確認します。
- ノズルを洗面器に向け、本体の主電源ダイヤルをON、ハンドルスイッチをONにして約5秒間水を出します。
- ハンドルスイッチをOFFにして、水を止めます。

ご使用方法

1.ハンドルを持つ

ノズル先端を回すために、ノズルダイヤルをつまめる位置でハンドルを持ちます。親指はハンドルスイッチ近くに添えてください。【図.A】

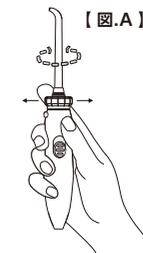

2.洗面台に顔を近づける

水が飛び散らないように、洗面台に向かって顔を近づけて少しかがみます。

3.ノズルを口に入れ、口を閉じる

水が飛び散らないように、口を閉じます。

4.水を出す

ハンドルスイッチをONにして水を出します。本体の水圧調節ダイヤルで水流の強さを調節します。水流を強くしすぎないように注意してください。

5.口腔洗浄をする

ノズルをゆっくりと歯並びにそって移動させて、歯の表裏、噛み合わせ面をまんべんなく洗浄します。ノズルの方向はハンドルのノズルダイヤルを回して変えることができます。*途中で水を止める場合はハンドルスイッチをOFFにしてください。




6.付属ノズルの使い方

●ノーマルノズル

歯の表側と裏側から、歯と歯の間に水流を当て、洗浄します。歯ぐきのケアをする場合は、水圧調節ダイヤルを弱めに設定して、歯ぐきに水流で刺激を与えます。


●歯周ポケット用ノズル【図.1】

水流を歯周ポケットの奥深くに送り込みます。水圧調節ダイヤルは1(最弱)の設定にし、ノズルを45度の角度で歯と歯ぐきの間に水流を当て、歯ぐきの縁に沿って優しく洗浄します。

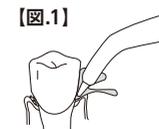


●舌クリーナーノズル【図.2】

舌専用のノズルです。ノズル先端を舌の中央から少し奥に置き、軽い圧力をかけて前方に引きます。

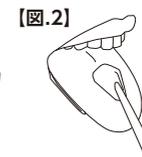


●歯列矯正用ノズル【図.3】

歯科治療の金具部分や届きにくいワイヤーの下なども、ブラシと水流できれいに洗浄することができます。

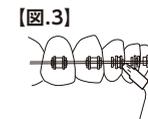

●ブラシ付き歯垢除去ノズル【図.4】

インプラントやクラウン治療をされた方や、歯並びが悪い方の取れにくい歯垢を、ブラシと水流で洗浄します。ノズルを90度の角度で当てます。先端を歯肉縁に沿わせて、歯の間を優しくブラッシングしながら水を流します。

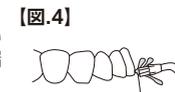

- 家族と使用する場合は、感染症のリスクがあるため、ひとつのノズルを共有するのは避け、各自専用のノズルとしてご使用ください。
- 追加ノズルのご購入は P.6【ノズルの交換・ご購入について】をご参照ください。

7.洗浄が済んだら

- 水垢がたまらないように、水抜き運転をします。
- タンクの水を全て捨てます。もう一度ハンドルスイッチをONにして、水が出なくなるまで出し続けます。
- ハンドルスイッチをOFFにして、本体の主電源ダイヤルをOFFにします。

使用後のお手入れ・保管方法


お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いてください。感電の原因となります。

お手入れ方法

- タンク内の水はご使用後に必ず毎回捨ててください。※雑菌などの繁殖の原因になります。
- 主電源ダイヤル・ハンドルスイッチをONにして本体内の水を抜きとってください。 ※水が出なくなるまで動かしてください。
- タンクなどの水に濡れた部分は、乾いた布で拭き取ってしっかりと乾燥させてください。
- ノズル・ハンドル・タンクは、水またはぬるま湯(40℃以下)で洗い、乾いた布で拭き取ってしっかりと乾燥させてください。
- 本体・タンクが汚れた時は、中性洗剤または水に浸した布で汚れを落とし、乾いた布で拭き取ってしっかりと乾燥させてください。

お手入れ・保管の注意

- 右図のタンク内部のゴムフィルターは、ゴミなどが機材内部に入り込まないためのフィルターです。この黒のキャップは決して抜かないでください。
- 本体やタンク、ハンドル、付属ノズルの汚れを落とす際に、ベンジン、シンナー、ガソリン、化学ぞうきん、金属製のたわしや硬いスポンジなどはご使用しないでください。変色や本体に傷がついたり、故障の原因になることがあります。
- タンクに漂白剤などの洗剤を入れないでください。本体内部で詰まったり、本体内部が変質したりして故障の原因になることがあります。
- 次のようなところに保管しないでください。
 - ・水のかかる場所
 - ・高温多湿、風通しが悪い、直射日光が当たる場所
 - ・ホコリや塩分などを含んだ空気の影響を受ける場所
 - ・化学薬品の保管場所や腐食性ガスの発生する場所
- お手入れ後は、十分に乾燥させた後、箱に入れたり、カバーをかけるなど衛生面に配慮してください。

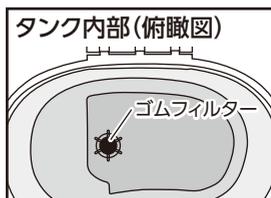

ノズルの交換・ご購入について

ノズルは消耗品です。6ヶ月を目安に交換してください。ノズルが損傷した場合はすぐに交換してください。

●ノーマルノズル

製品コード: KSZY-004P(ピンク)
製品コード: KSZY-004L(青)
製品コード: KSZY-004G(緑)

●歯列矯正用ノズル

製品コード: KSZY-006L

●舌クリーナーノズル

製品コード: KSZY-008L



●歯周ポケット用ノズル
製品コード: KSZY-007L

●ブラシ付き歯垢除去ノズル
製品コード: KSZY-005L



←ご購入はコチラから
ライオン 公式オンラインストア
<https://lithon-store.com/c/all/option/mizuyouji>
※すべて送料はお客様の負担になります。

故障かな?と思ったら

■修理を依頼される前にご確認ください

- 下記の場合、再確認いただくことで故障ではなく、問題が解消する場合があります。問題が解消しない場合はただちに使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いてください。安全を確認したうえで、弊社『お客様サービスセンター』までご相談ください。
- ご家庭での修理、分解は絶対におこなわないでください。

問題事例	再確認するところ	問題解消の方法
電源が入らない。	主電源ダイヤルはONになっていますか?	主電源ダイヤルをONにしてください。
	電源プラグがコンセントに差し込まれていますか?	電源プラグをコンセントに正しく差し込んでください。
水流が弱い。もしくは出ない。	タンクは正しく取り付けられていますか?	タンクを本体に垂直に押し下げ、完全にセットしてください。
	ハンドルスイッチはONですか?	ハンドルスイッチをONにしてください。
	水を入れてから十分な時間が経っていますか?	水圧調節ダイヤルが最大で水が出る状態にすると、通常15秒以内に水が出るようになります。
ノズルとハンドルの間から水が漏れている。もしくは水圧でノズルが外れる。	ノズルは正しく取り付けられていますか?	ノズルをカチッという音がなるまでしっかりと差し込んでください。
ハンドルから水漏れしている	ハンドル洗浄後してからすぐの使用ですか?	製品の仕様上、洗浄してから間もない状態だとハンドル内部に溜まった水が出てくる場合があります。
	ノズルはしっかりと取り付けられていますか?	ハンドルにノズルをしっかりと取り付けられているか確認してください。
チューブから水漏れしている	チューブが破損していませんか?	ただちに使用を中止し、弊社『お客様サービスセンター』へ連絡してください。
勝手に電源がOFFになる	長時間電源をONにしていますか?	製品の仕様上、一定時間経つと自動的に電源がOFFになります。本体の主電源ダイヤルをONに入れ直してください。
本体から異常な音がする	製品は動作中ですか?	製品の仕様上、動作中に ≤ 75 dB 程度の音が出ることがございます。

製品仕様

定格電圧	AC100V	タンク容量	1000mL
定格周波数	50/60Hz	圧力範囲	30~125psi
定格消費電力	18W	電源コード	約1.2m
サイズ	約 W210 × D125 × H220 mm	付属品	ノーマルノズル×3、歯列矯正用ノズル、舌クリーナーノズル、歯周ポケット用ノズル、ブラシ付き歯垢除去ノズル
本体質量	約900g		
材質	本体・各ノズル:ABS、吸盤:シリコン		

※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。